

BISTOURI ELECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE

CHIRURGIE AMBULATOIRE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
CHIRURGIE PLASTIQUE
CHIRURGIE VASCULAIRE
DERMATOLOGIE
OTORHINOLARYNGOLOGIE
UROLOGIE
GYNÉCOLOGIE
MÉDICINE VÉTÉRINAIRE
SECTEUR DENTAIRE
PREMIERS SOINS











conseillé pour interventions de petite et de moyenne chirurgie

SURTRON, à travers la sélection des functions permet d'effectuer une coupure pure CUT, coupure-coagulée BLEND, coagulation surface FORCED COAG, coagulation de profondeur en absence de carbonisation SOFT COAG et, avec spécial adaptateur, coaquiation bipolaire BIPOLAR.

La lecture digitale de la puissance fournie et la surveillance parmi un microcontroleur des fonctions opératives, assurent une fiabilité absolue des conditions de travail.

SURTRON permet une chirurgie très professionelle grâce aux solutions ergonomiques et de sécurité utilisées.

La connexion de l'électrode neutre est toujours sous surveillance et, si vous utilisez un électrode neutre biparti, même le contact électrode neutre/patient.

La possibilité d'appliquer les fonctions et de régler l'approvisionnement de puissance par le bouton porteelectrodes, permet d'effectuer des interventions chirurgiques sans soustraire attention au champs opératoire.

Classification électrique: I CF Classe DDM 93/42/CE: II b

CONTRÔLES

Circuit de contrôle Plaque / Patient OC Contrôle de la puissance émise Autodiagnostic erronés


LED SpA

PROGETTAZIONI E PRODUZIONI ELETTRONICHE

via Selciatella, 40 - 04011 Aprilia(LT) - Italy www.led.it - info@led.it - www.surtron.com

Dimensions - mm



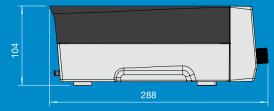

Composition Standard:

- Traitement de support plusieurs usages avec poussoirs

- Kit électrodes assorties (10 pcs) 5cm 00500.00

- Câble pour connection électrode neutre

Électrode neutre acier

- Pédale unique

- Câble alimentation 2m

F4243

00500.00

00404.08

5365 00300.00 00100.03

