




Seringue à insuline de sécurité SOL-CARE™

En conformité avec les critères énoncés dans la directive européenne 2010/32/UE - Prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire.

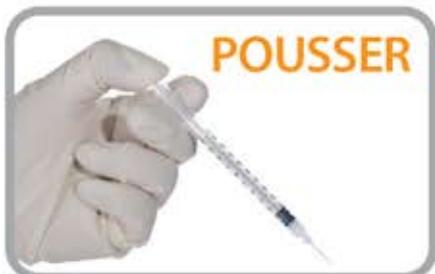



Pour activer la fonction de sécurité et délivrer la dose complète, poussez le piston au-delà du zéro.



Tirez sur le piston jusqu'à ce que l'anneau de verrouillage soit engagé. Observez le retrait de l'aiguille dans le canon.



Cassez le piston pour désactiver de façon permanente la seringue.

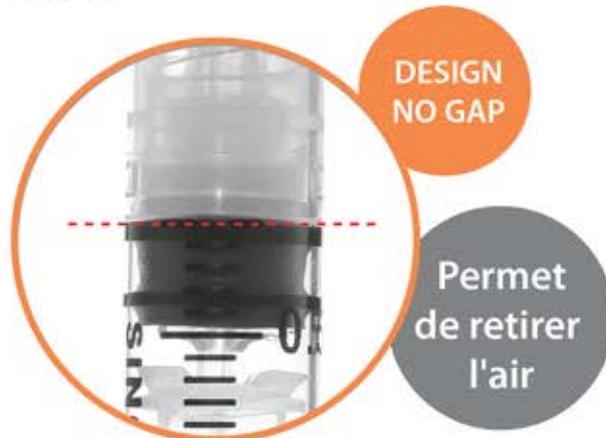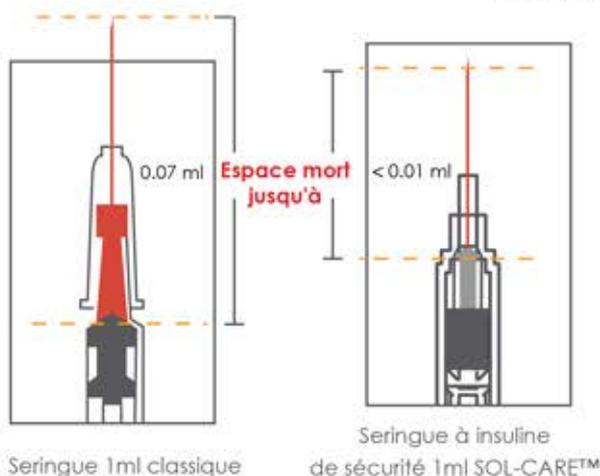

Seringue d'insuline de sécurité SOL-CARE™ 100U avec aiguille fixe

Référence	Capacité	Gauge	Diamètre extérieur (mm)	Longueur		Boîte / Carton (pièces)
				(mm)	(pouces)	
100089IM	0.5 ml	30G	0.3 mm	8 mm	5/16"	100/1000
100002IM	0.5 ml	29G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000
100081IM	1 ml	30G	0.3 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000
100020IM	1ml	30G	0.3 mm	8 mm	5/16"	100/1000
100017IM	1 ml	29G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000
100071IM	1 ml	28G	0.35 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000